

bright Hand Driver (BHD-2.0)

사용방법

1. 사용 전 준비 사항

- (1) 사용 전 제품이 파손된 곳이 없는지 확인하십시오.
- (2) 사용 전에 구성품이 비 멸균 상태일 경우에는 반드시 멸균 후 사용하십시오. (*멸균 필요 부품: HEAD, Assist Grip)

가. 멸균방법: 습열 멸균 (ISO 17665-1, 2에 따름다)


나. 멸균 조건

- ① 온도: 121℃
- ② 멸균 시간: 15분
- ③ 건조 시간: 30분

2. 조작방법

[1] 시술 기구 체결

- (1) 적합한 사이즈의 시술 기구 선택 후 HEAD의 구멍에 시술 기구를 연결하십시오.

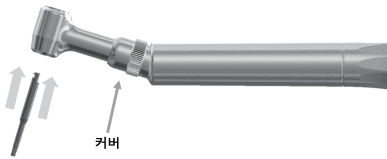

- (2) 연결 후 시술 기구가 정확하게 고정되어 있는지 축 방향으로 약간 당겨 확인하십시오.
- (3) REAR HANDLE를 오른쪽으로 돌려 기구를 조이거나, 왼쪽으로 돌려 풀며 사용하십시오.
- (4) 사용이 끝난 후 HEAD 뒷부분의 홈을 누른 채 시술 기구를 제거하십시오.

[2] REAL HANDLE 체결 (BHD-2.0만 해당)

* 구성품(GTC-20, GTC-35, GTC-TL, GAP-35)은 BHD-2.0 모델에 호환 가능하며, BHD-1.0 및 타사 제품과는 사용할 수 없습니다.

- (1) 멸균이 끝난 HEAD와 ANGLE JOINT를 조립 후, 적절한 REAR HANDLE을 조립하여 사용하십시오. 필요시 Assist Grip을 REAR HANDLE에 끼우십시오. (Assist Grip은 사용자의 선택으로 필수 장착 구성품이 아님)
- (2) Assist Grip 혹은 REAR HANDLE을 오른쪽으로 회전시켜 나사를 조이거나, 왼쪽으로 회전시켜 나사를 풀면서 시술을 진행하십시오.



HEAD & ANGLE JOINT



REAR HANDLE



Assist Grip

- (3) 사용 후 Assist Grip과 HEAD는 사용자 멸균하여 보관하십시오.
- (4) BHD-1.0 모델은 ANGLE JOINT와 REAL HANDLE이 분리되지 않는 일체형 제품입니다.

※ 토크 값 설정

- ① GTC-20: 최대 토크 20Ncm
- ② GTC-35: 최대 토크 35Ncm
- ③ GTC-TL: 최대 토크 없음

(구성품 GTC-20 및 GTC-35의 경우 각 최대 토크에 도달할 시 토크를 전달하지 않고, 핸들이 헛돌아 안전한 시술을 진행할 수 있습니다. GTC-TL의 경우 최대 한계 토크가 별도로 설정되어 있지 않기에, 사용 시 사용자의 각별한 주의가 필요합니다.)

3. 사용 후 보관 및 관리 방법

- (1) 시술 후에는 항상 아래와 같은 방법으로 운환을 실시하십시오.
- ① 알코올 거즈로 세트 전체를 닦은 후, ANGLE JOINT의 커버를 열고 HEAD와 기어 아세이의 오일 홈에 오일 2방울씩 넣으십시오.
- ② 커버를 닫고, 축을 몇 바퀴 회전하여 오일을 골고루 문힌 후, 넘쳐 나는 과잉 오일을 닦아내십시오.
- (2) 직사광선과 다습한 장소를 피하여 상온에서 보관하십시오.
- (3) 먼지 등 이물질이 없는 장소에 보관하십시오.
- (4) 사용 후 제품에 묻은 이물질을 반드시 제거한 후 보관하십시오.

"부작용 보고 관련 문의처
(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)"